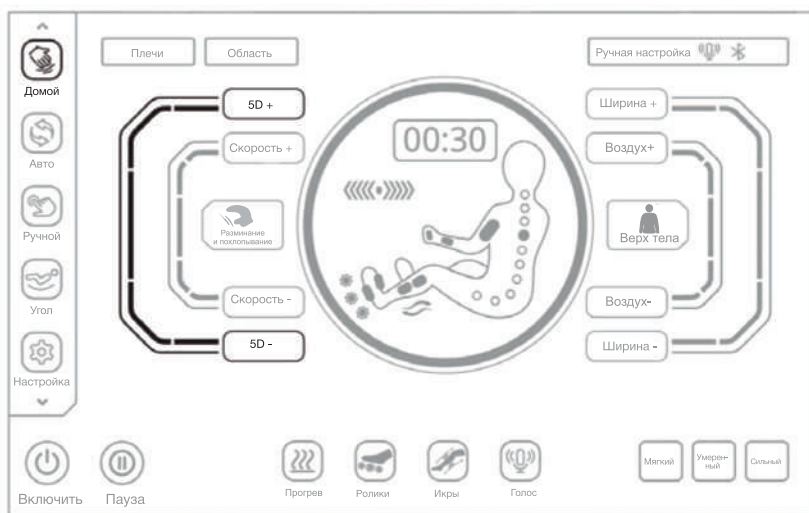
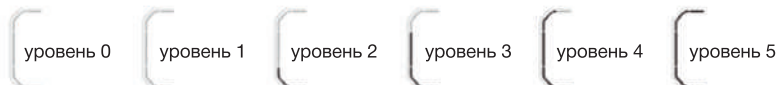


Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить интенсивность 5D, которая регулируется от 1 до 5
	Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность 5D, которая регулируется от 1 до 5

**Примечание:** Вы также можете выбрать кнопку **5D +** или кнопку **5D -** в интерфейсе для настройки интенсивности 5D (эта функция является быстрым способом переключения между интенсивностью 5D в интерфейсе текущего состояния ручной программы - интенсивность 5D).




Настройка интенсивности 5D-массажа




Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить интенсивность 5D, которая регулируется от 1 до 5
	Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность 5D, которая регулируется от 1 до 5

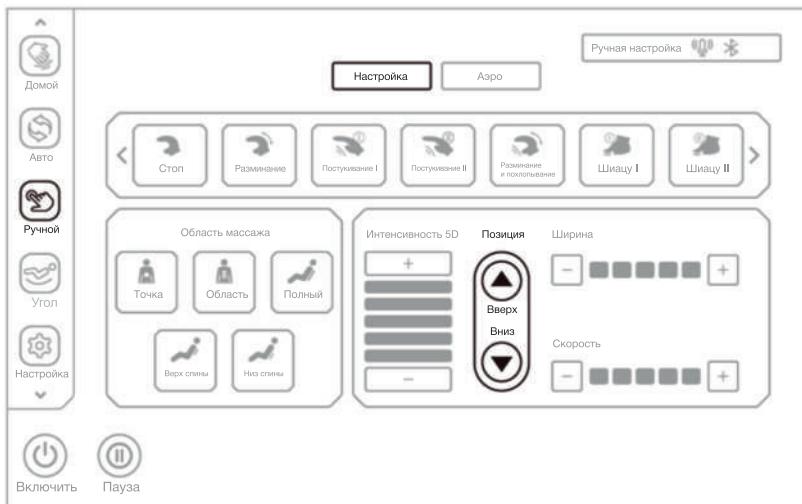4. При выборе области точечного и локального массажа отрегулируйте массажные ролики при помощи стрелок вверх или вниз.



Настройка положения массажных роликов

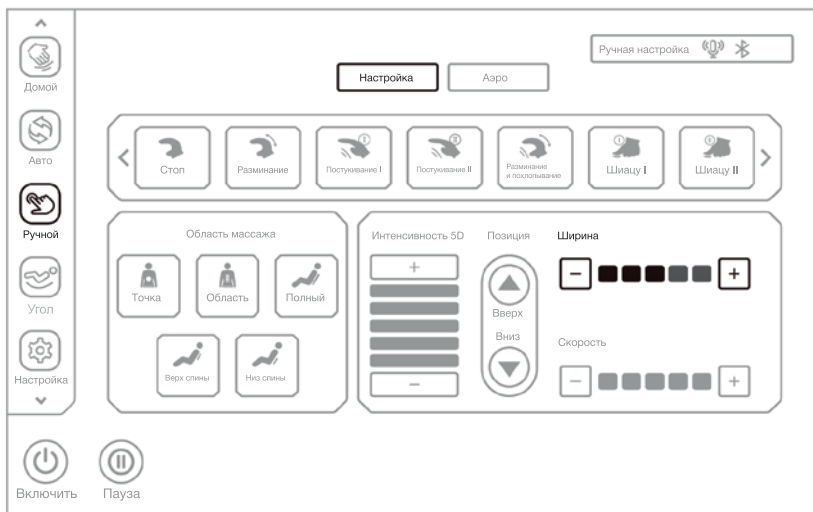5. Для настройки радиуса движения роликов, выберите соответствующий пункт меню.



Настройка радиуса движения массажных роликов


(1) Радиус можно отрегулировать только в ручном режиме настройки при выборе техники массажа или области массажа.

(2) На выбор представлено 5 уровней радиуса, при этом 1 является самым маленьким и 5 - самым большим. Пожалуйста, регулировка доступна для массажных техник: Похлопывание, Похлопывание I, Надавливание, Надавливание II, 5D III и 5D IV.




Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить радиус движения ролика, который регулируется от 1 до 5
	Нажмите, чтобы уменьшить радиус движения ролика, который регулируется от 1 до 5

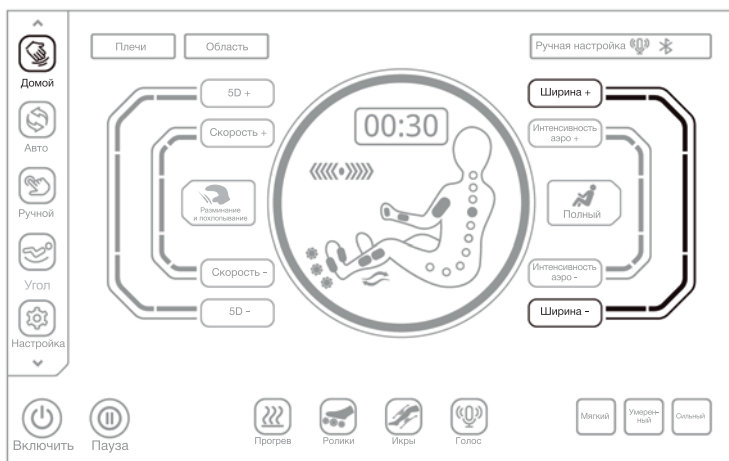**Примечание:** радиус можно также отрегулировать нажав на **Ширина +** или на **Ширина -** в домашнем интерфейсе.




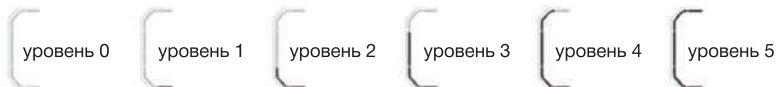Домашний интерфейс – регулировка радиуса массажных роликов



Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить радиус движения роликов, который регулируется от 1 до 5
	Нажмите, чтобы уменьшить радиус движения ролика, который регулируется от 1 до 5

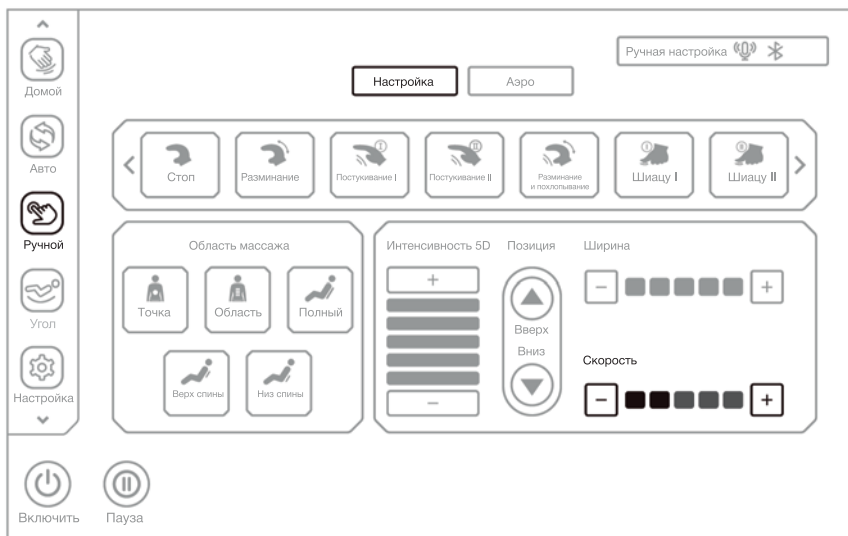6. Для регулировки скорости массажа выберите massage speed





Регулировка скорости массажа


(1) Скорость можно отрегулировать только в ручном режиме настройки при выборе техники или области массажа.

(2) На выбор представлено 5 уровней скорости, при этом 1 - самая быстрая, а 5 - самая медленная. Скорость не может быть отрегулирована, когда не выбрана техника.





Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить скорость от 1 до 5
	Нажмите, чтобы уменьшить скорость от 1 до 5

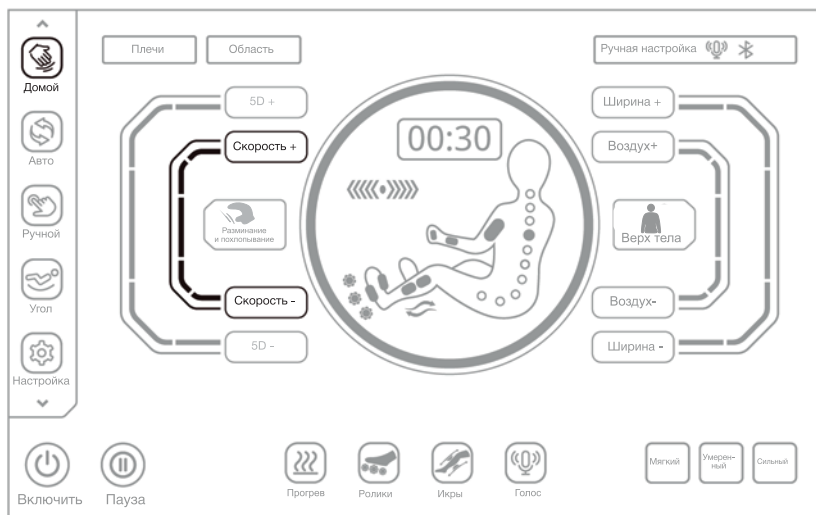**Примечание:** С помощью кнопок **Скорость +** и **Скорость -** в текущем состоянии  интерфейса можно также отрегулировать скорость массажа. На выбор представлено 5 уровней.



Регулировка скорости массажа





Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить скорость от 1 до 5
	Нажмите, чтобы уменьшить скорость от 1 до 5


7. Для воздушно-компрессионного массажа войдите в меню Аэро, чтобы выбрать область. Области воздушно-компрессионного массажа включают в себя массаж верхней части тела, нижней части тела и всего тела. Подача воздуха будет отключена, когда все вышеуказанные режимы будут выключены.



Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы включить или отключить функцию воздушно-компрессионного массажа всего тела.
	Нажмите, чтобы включить или отключить функцию воздушно-компрессионного массажа верхней части тела.
	Нажмите, чтобы включить или отключить функцию воздушно-компрессионного массажа нижней части тела.

Дисплей воздушно-компрессионного массажа		
Верх тела 	Низ тела 	Полный 

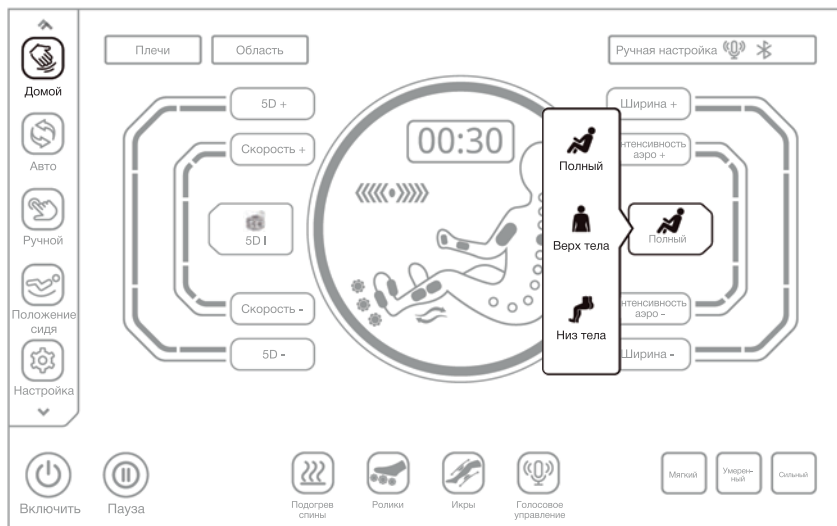
**Примечание:** нажав на кнопку  в текущем интерфейсе  можно также настроить область воздушно-компрессионного массажа (эта функция является быстрым способом переключения между областями воздушно-компрессионного массажа).



Текущий интерфейс – воздушно-компрессионный массаж

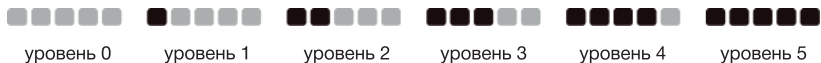8. Для регулировки интенсивности воздушного массажа меню «Аэро» должно быть включено. На выбор представлено 5 уровней интенсивности, где 1 является самым слабым, а 5 - самым сильным.





уровень 0

уровень 1

уровень 2


уровень 3

уровень 4


уровень 5

Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить интенсивность от 1 до 5
	Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность от 1 до 5

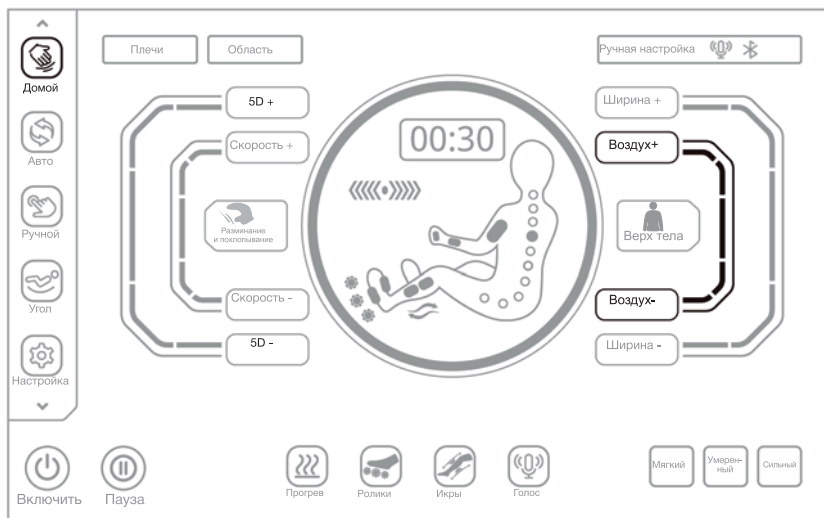**Примечание:** также можно нажать на кнопку **Воздух+** или на **Воздух-** в домашнем меню, чтобы отрегулировать интенсивность воздушного массажа. На выбор представлено 5 уровней.



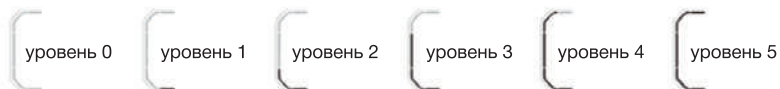Домашний интерфейс – Интенсивность воздушно-компрессионного массажа



уровень 0

уровень 1

уровень 2

уровень 3


уровень 4


уровень 5

Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить интенсивность от 1 до 5
	Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность от 1 до 5





# Регулировка положения кресла

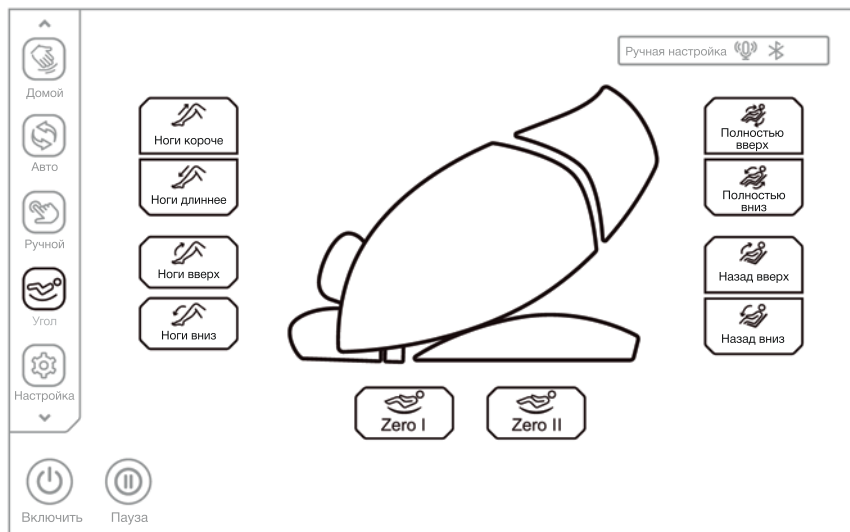Нажмите кнопку  в строке меню в левой части экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс регулировки угла наклона кресла, который включает в себя выдвигание подставки для ног, выдвигание подставки для стоп, подъем подставки для ног, подъем всего механизма, подъем спинки, режим невесомости 1 и 2 и другие опции.





Регулировка положения кресла



## 1. Режим невесомости

Кнопка	Описание
	Режим невесомости 1: автоматически регулирует спинку кресла и подставку для ног в положение невесомости 1.
	Режим невесомости 2: автоматически регулирует спинку кресла и подставку для ног в положение невесомости 2.



## 2. Выдвигание/ задвигание подставки для ног

Кнопка	Описание
 Ноги короче	Задвигание подставки для ног: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы медленно задвинуть подставку для ног вверх и отпустите, когда достигните нужного положения.
 Ноги длиннее	Вытягивание подставки для ног: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы медленно вытянуть подставку для ног вверх и отпустите, когда достигните нужного положения.



### 3. Поднимание/ опускание подставки для ног

Кнопка	Описание
 Ноги вверх	Подъем подставки для ног: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно поднять подставку для ног и отпустите ее, чтобы остановить; после завершения операции произойдет автоматическое определение длины стопы.
 Ноги вниз	Опускание подставки для ног: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно опустить подставку для ног и отпустите ее, чтобы остановить; после завершения операции произойдет автоматическое определение длины стопы.

### 4. Регулировка положения кресла

Кнопка	Описание
 Полностью вверх	Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно поднять спинку кресла и опустить подставку для ног, и отпустите ее, чтобы остановить; после завершения действия произойдет автоматическое определение длины тела.
 Полностью вниз	Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно опустить спинку кресла и поднять подставку для ног, и отпустите ее, чтобы остановить; после завершения действия произойдет автоматическое определение длины тела.

### 5. Регулировка спинки кресла

Кнопка	Описание
 Назад вверх	Подъем спинки: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно поднять спинку, и отпустите, чтобы остановить.
 Назад вниз	Опускание спинки: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно опустить спинку, и отпустите, чтобы остановить.

# Настройки

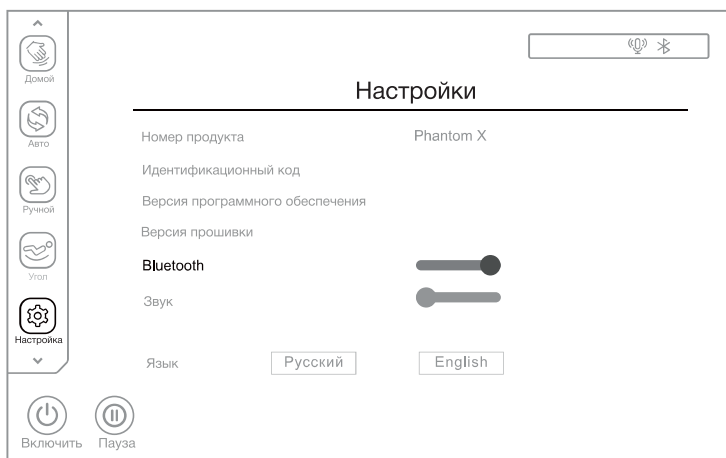
Нажмите кнопку «Настройка» в строке меню в левой части экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс настроек, где можно просмотреть номер продукта, номер версии программного обеспечения, идентификационный код и номер версии прошивки. Интерфейс включает в себя функции настроек, такие как голосовое управление, выбор языка и Bluetooth.

1. Модель продукта, версия программного обеспечения, серийный номер продукта и версия встроенного ПО отображают информацию о текущем устройстве.

2. Bluetooth (инструкции для воспроизведения музыки по Bluetooth).

Нажмите на переключатель Bluetooth, чтобы включить или отключить функцию Bluetooth. После сопряжения и подключения устройства с функцией Bluetooth (например, мобильного телефона, планшета и т.д.) к модулю Bluetooth массажного кресла, воспроизводимая устройством музыка может быть передана по беспроводной сети в звуковую систему массажного кресла через Bluetooth.


- Войдите в главное меню вашего устройства. Откройте "Настройки" и выберите опцию "Bluetooth". Откройте "Bluetooth", и Bluetooth автоматически выполнит поиск нового устройства Bluetooth.
- Интеллектуальное устройство выполнит поиск соответствующей модели Bluetooth (например, Phantom XXXX). Нажмите кнопку "Подключиться".
- Включите музыку на вашем устройстве и выберите песню для воспроизведения.



Настройки


### 3. Выбор языка

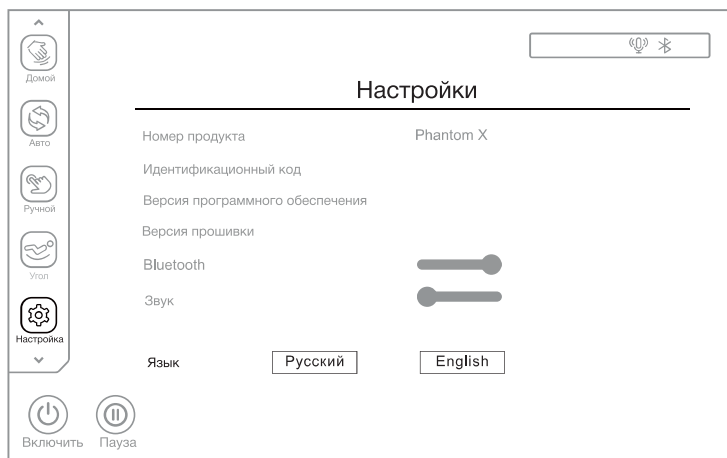Языком по умолчанию является русский, но можно выбрать и английский..



## Голосовое управление

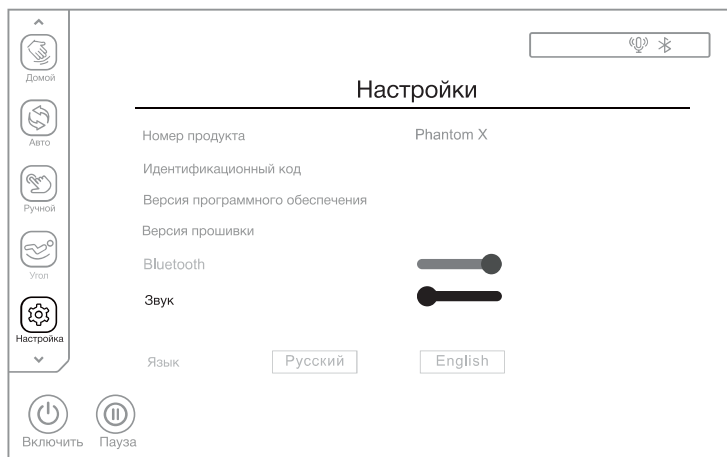Нажмите кнопку голосового управления, чтобы включить или выключить функцию голосового управления. После включения голосового помощника вы можете управлять массажным креслом с помощью соответствующих команд.



Когда массажное кресло включено или находится в режиме ожидания, убедитесь, что функция голосового помощника подключена.

Если она отключена, войдите в интерфейс настройки и включите ее. После чего коротко нажмите кнопку на пульте и скажите : “Hi Alice” or “Hey Alice”(«Привет, Алиса» или «Эй, Алиса»), чтобы воспользоваться функцией голосового управления. После успешного включения такой функции массажное кресло ответит: «I am here – Я здесь». После этого вы можете произносить команды.

Также вы можете нажать кнопку голосового управления на подлокотнике, чтобы включить функцию. Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить или выключить функцию голосового управления. После чего вы должны произнести команду в течение шести секунд, соответствующая функция будет включена после получения ответа от массажного кресла; если в течение шести секунд не поступит команды, функция голосового управления будет автоматически отключена, и ее необходимо будет снова включить. Список команд приведен ниже.

**Примечание:** при включении функции голосового управления говорите на английском языке, скорость речи умеренная, голосовые команды должны следовать скрипту.


<b>Голосовое управление</b>		
Активация помощника: Скажите “Hi Alice” или “Hey Alice”. Ответ: I am here (Я здесь).		
<b>№</b>	<b>Команда</b>	<b>Ответ</b>
1	Massage on - Включи массаж	Ок, включила массаж
2	Massage close - Выключи массаж	Ок, выключила массаж
3	Total relax - Релакс	Ок, режим Релакс
4	Keep Fit - Будь в форме	Ок, режим Будь в форме
5	Sleep Aid - Перед сном	Ок, режим Перед сном
6	Neck & Shoulder Care - Шея и плечи	Ок, режим Шея и плечи
7	Vitality Stimulates - В обед	Ок, режим В обед
8	Thai massage - Растяжка Тай	Ок, режим Растяжка Тай
9	Open the air pressure - Вкл. возд-компр.	Ок, включила воздушно-компрес. режим
10	Close the air pressure - Выкл. возд-компр.	Ок, выключила воздушно-компрес.
11	Up the seat position - Подними спинку	Ок, подняла спинку
12	Down the seat position - Опусти спинку	Ок, опустила спинку
13	Change the other mode - Поменяй режим	Ок, поменяла режим массажа
14	Go little down - Пониже	Ок, понижe
15	Go little up - Повыше	Ок, повыше

**Примечание:** команды 14 и 15 используются только после команды 13.


# Оценка состояния здоровья

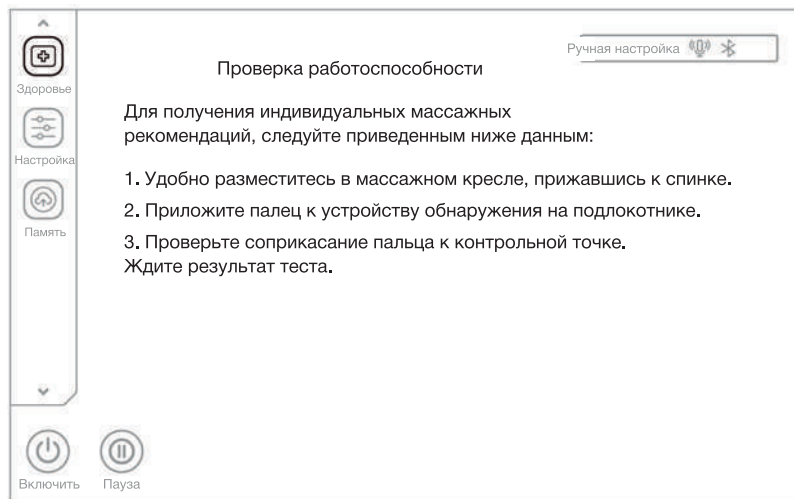1. Запуск оценки состояния здоровья (используйте эту функцию после включения)

Нажмите кнопку "Здоровье" в строке меню в левой части экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс оценки состояния здоровья, нажмите кнопку "Старт" для начала оценки. После чего аккуратно поместите указательный или средний палец на датчик. Через несколько секунд он отобразит данные о пульсе, содержании кислорода в крови и микроциркуляции в режиме реального времени. Дождитесь завершения процесса оценки.




## Индикатор процесса оценки состояния здоровья

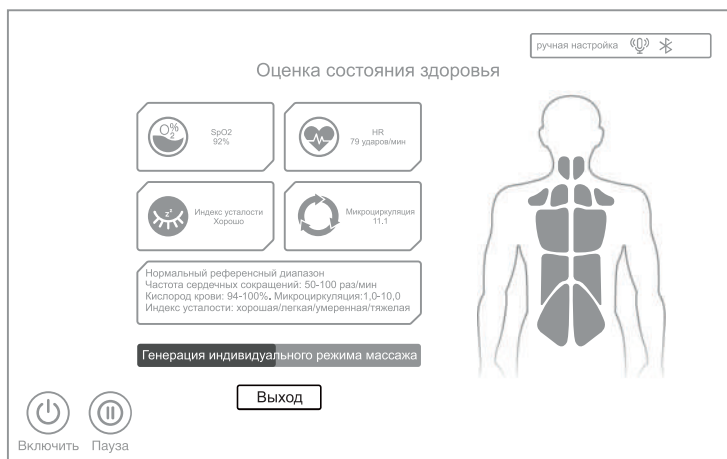


## 2. Рекомендуемая программа

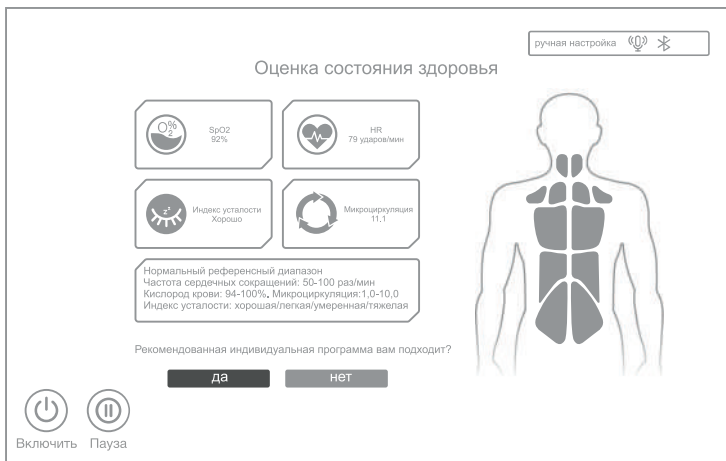Когда оценка будет завершена, на экране появится пульс, содержание кислорода в крови и уровень усталости соответственно. Содержание кислорода в крови означает, что концентрация кислорода в крови в норме колеблется от 95% до 99%. Уровень усталости: отсутствует, легкая, умеренная и тяжелая. В зависимости от вашего уровня усталости вам будет рекомендована автоматическая программа массажа. Выберите "Да", чтобы приступить к рекомендуемой программе, и "Нет", чтобы вернуться в режим меню до определения оценки здоровья.



## 3. Не удалось провести обнаружение.

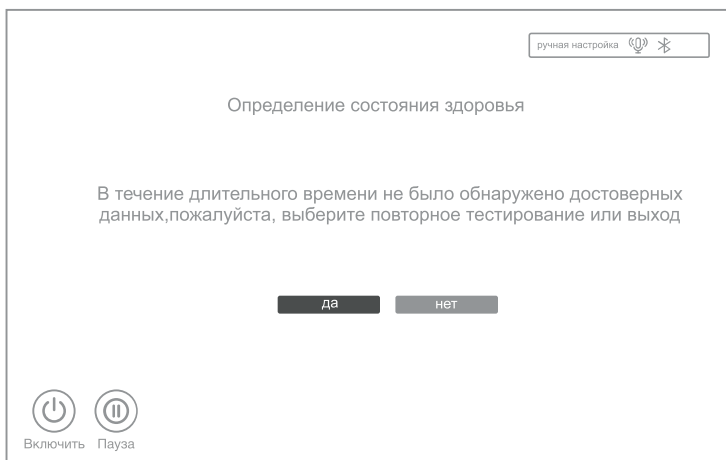Если обнаружение не удалось провести, пользователю будет предложено повторное обнаружение. Выберите "Да", чтобы начать заново, и "Нет", чтобы вернуться в меню до определения оценки здоровья.




#### 4. Выход из меню оценки состояния здоровья

Во время оценки, нажмите на «Выход», чтобы завершить оценку и вернуться в предыдущий интерфейс.



#### 5. Пользовательские настройки (используйте эту функцию после включения)

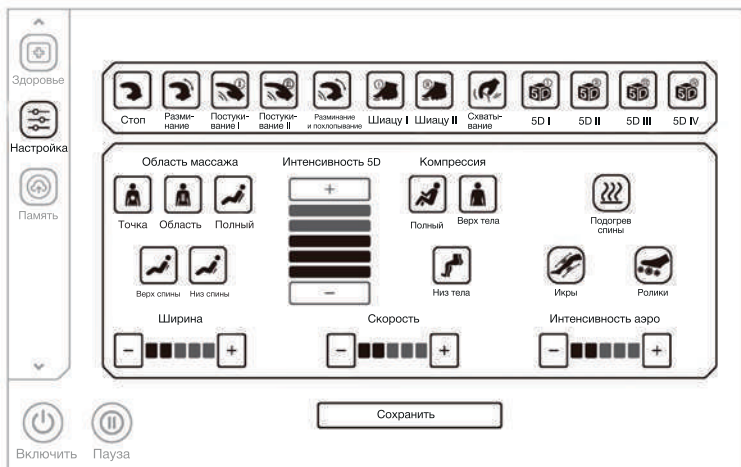
Нажмите кнопку  в строке меню в левой части дисплея, чтобы войти в интерфейс пользовательских настроек и выбрать либо Пользовательские настройки I, либо Пользовательские настройки II (только если соответствующие настройки были ранее установлены или сохранены).




Изображение интерфейса пользовательских настроек





Нажмите «Настройка 1» или «Настройка 2», чтобы войти в интерфейс пользовательских настроек, затем выберите предпочитаемую технику массажа, область массажа, интенсивность 5D, область воздушного массажа, радиус массажа, скорость массажа, интенсивность воздушного массажа, подогрев спины, разминание икроножных мышц и другие функции, затем нажмите Save - Сохранить, чтобы сохранить текущие настройки как Пользовательские I и Пользовательские II. После успешного сохранения настроек пользовательская программа будет немедленно доступна и может быть использована для следующего массажа, нажав на сохраненную пользовательскую программу





## Хранилище

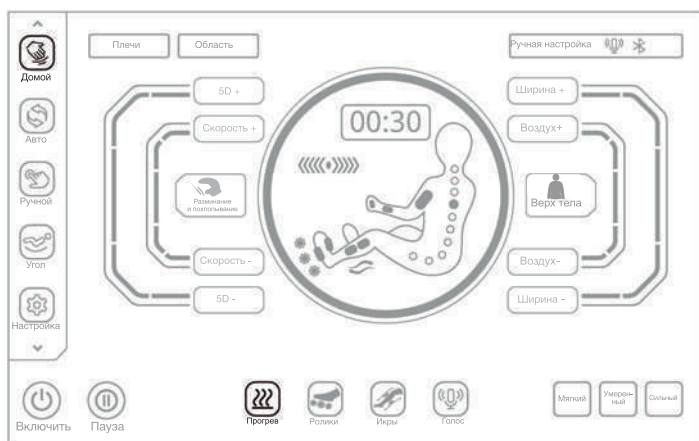
Нажмите кнопку  в строке меню в левой части дисплея, чтобы войти в интерфейс хранилища функций массажа с двумя категориями, включая сохранение функций массажа и вызов функции массажа. Хранилище для массажа включает в себя: Вариант I, Вариант II и Вариант III. Вызов сохраненных функций массажа включает в себя: Пользователь I, Пользователь II и Пользователь III.




Кнопка	Описание
	<p>Сохранение: Сохранение текущей программы массажа, включая автоматическую программу, технику массажа, область воздушного массажа и интенсивность, положение и угол наклона подставки и спинки, а также другие функции массажа.</p>
	<p>Вызов: Вызов сохраненной программы массажа, включая автоматическую программу, технику массажа, область воздушного массажа и интенсивность, положение и угол наклона подставки и спинки, а также другие функции массажа.</p>




## Другие функции



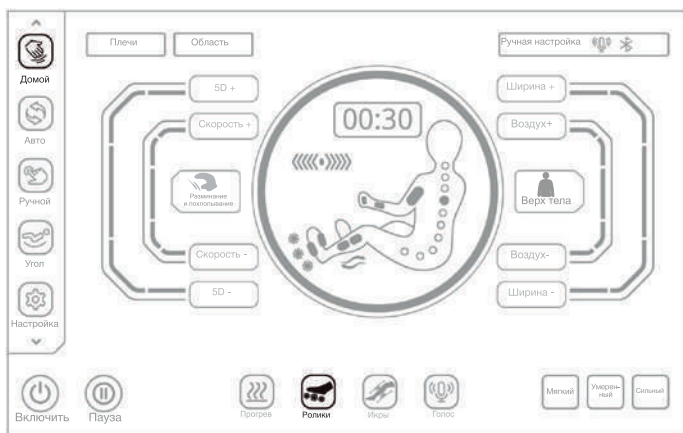В меню  нажмите кнопку подогрева , чтобы включить или выключить функцию подогрева спины. Спинка прогреется через 3 минуты после включения функции.




В меню  нажмите кнопку , чтобы включить или выключить функцию роликового массажа стоп с тремя регулируемыми скоростями.




Кнопка	Описание
 <p>уровень 1</p>  <p>уровень 2</p>  <p>уровень 3</p>	<p>Нажмите кнопку, чтобы включить или отключить функцию роликового массажа. Нажмите один раз, чтобы включить 1-ю скорость; нажмите второй раз, чтобы включить 2-ю скорость; нажмите в третий раз, чтобы включить 3-ю скорость; и нажмите в четвертый раз, чтобы отключить функцию роликового массажа.</p>

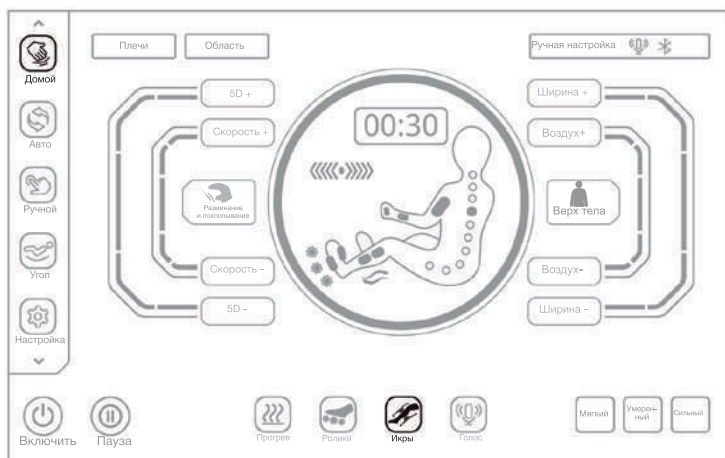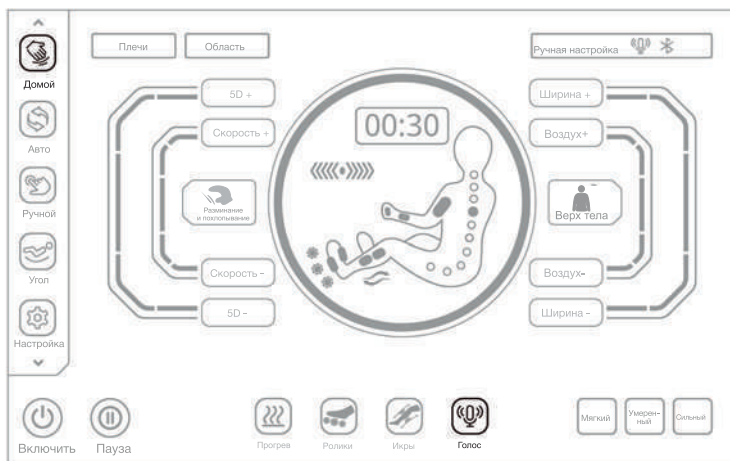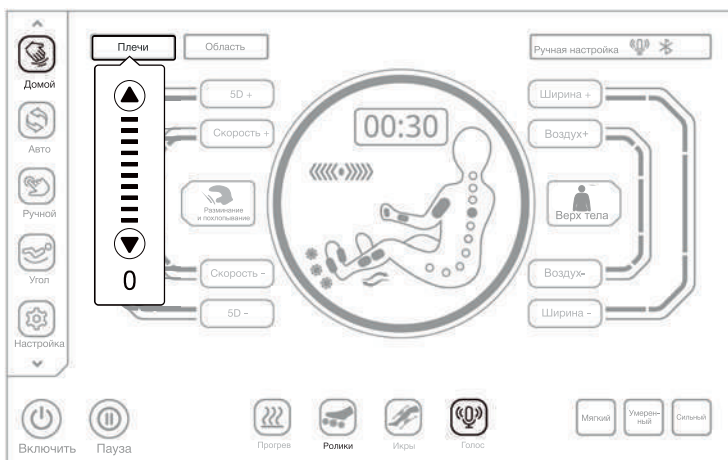
В меню  нажмите кнопку , чтобы включить или выключить функцию разминающего массажа икр. Разминающий массаж сопровождается воздушно-компрессионным массажем, что помогает снять скованность или напряжение икроножных мышц, вызванные длительным стоянием.




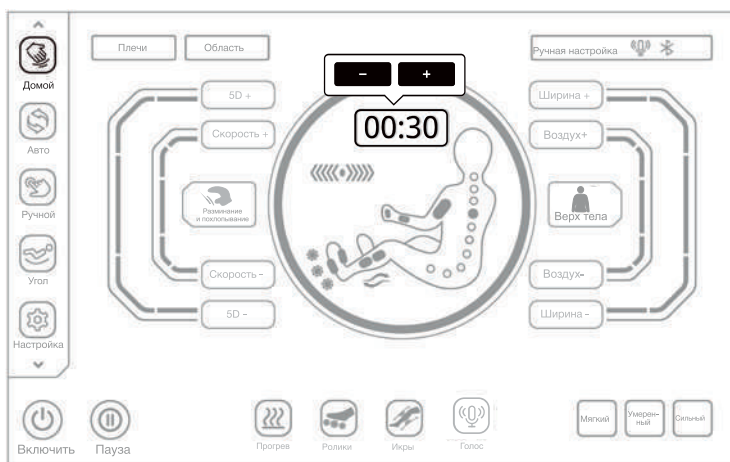
В меню  нажмите кнопку , чтобы активировать голосового помощника.



В меню  нажмите кнопку "Регулировка положения плеч" **плечи** и с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз отрегулируйте положение уровня плеч (11 положений).



В меню  нажмите кнопку "Настройка времени массажа", **00:30** С помощью кнопок "плюс" и "минус" вы можете увеличить или уменьшить время массажа.  
Нажмите кнопку **+** чтобы увеличить время массажа на 5 минут, максимум - до 40 минут.  
Нажмите кнопку **-** чтобы уменьшить время массажа на 5 минут.




Вы ознакомились с инструкциями по эксплуатации пульта дистанционного управления.

## Завершение работы

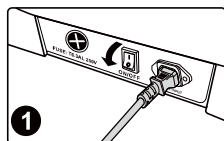
Во время массажа нажмите клавишу «Вкл/Выкл» на сенсорном пульте дистанционного управления или клавишу «Вкл/Выкл» на правом подлокотнике, чтобы выключить кресло. Немедленно отключите все функции массажа, верните спинку и подножку в исходное положение, так как после включения все функции массажа будут автоматически отключены, но при этом спинка и подножка останутся в прежнем положении. Отключите питание кресла, как показано на рисунке.




Отключите питание кресла, как показано на рисунке (схематичная иллюстрация отключения питания кресла).



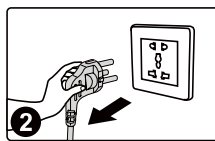Отключите тумблер питания (положение "0")



Вытащите вилку из розетки

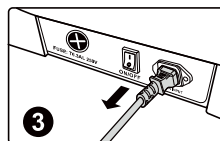


Вытащите кабель из разъема

# УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
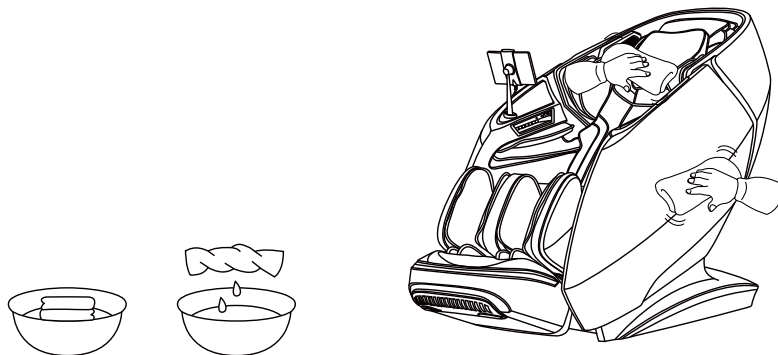
## Чистка деталей из искусственной кожи и пластика

- Протрите кожу мягкой сухой тканью.
- Не используйте химические вещества, такие как растворитель, бензин, спирт и т.д для очистки кресла.
- При использовании имеющихся в продаже средств по уходу за кожей (тряпок), пожалуйста, следуйте инструкциям по применению.
- Если искусственная кожа особенно загрязненная, протрите ее следующим образом.
  - 1) Погрузите мягкую ткань в воду или теплую воду, содержащую 3-5% нейтрального моющего средства, затем тщательно отожмите ее.
  - 2) Используйте вышеуказанную мягкую ткань для протирания кожаной поверхности.
  - 3) Протрите кресло чистой тканью, смоченной в чистой воде и отжатой.
  - 4) Протрите сухой мягкой тканью.
  - 5) Дайте креслу высохнуть естественным путем на воздухе.
- Для трудно выводимых пятен, пожалуйста, используйте меламиновую губку, смоченную в нейтральном моющем средстве.
- Не используйте фен для сушки поверхности.
- Будьте осторожны при протирании кресла джинсовой тканью и цветными тканями, так как цвет ткани может испачкать поверхность кожи.
- Не давайте коже соприкасаться с пластиком в течение длительного времени, так как это может привести к обесцвечиванию.
- Искусственная кожа может обесцветиться, поэтому при использовании краски для волос, пожалуйста накройте полотенцем.



# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Когда подставка или спинка достигают определенного положения, то при дальнейшем нажатии на кнопку регулировки, положение кресла не будет меняться, а будет издаваться непрерывный сигнал «бип, бип».	Из-за своей конструкции данное изделие имеет ограниченную защиту предельного положения. В то же время при достижении предельного значения прозвучит звуковой сигнал напоминания.
Функция не работает или некоторые функции не работают после включения устройства.	После включения кресла с помощью кнопок необходимо вручную выбрать автоматическую программу массажа или другую функцию. Если не произвести никаких действий, кресло автоматически выключится через 20 минут. В режиме ручного управления функции, которые не были выбраны, могут быть отключены, их необходимо активировать в ручном режиме.
При регулировке положения кресло издает звуки трения кожи.	Кресло изготовлено из высококачественной кожи. Из-за присущих кожаным материалам характеристик при трении при относительно перемещении будет издаваться небольшие звуки, что является нормальным явлением. <b>Примечание:</b> Если вы слышите звук рвущейся ткани или кожи во время работы кресла, пожалуйста, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервис.
Массажный ролик не доходит до плеч и шеи.	Если голова не касается подголовника или спина не касается спинки, положение плеч может быть ниже фактического положения в процессе определения изгибов тела. Глубоко сядьте в кресло, положите голову на подголовник и начните работу сначала.
Устройство повреждено.	Кабель питания или вилка ненормально горячие. Во избежание несчастных случаев обязательно обратитесь в сервис.

Если проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с дилером для технического обслуживания.

## Совет:

Не пытайтесь отремонтировать массажное кресло самостоятельно, наша компания не несет ответственности за травмы или повреждения, вызванные любым обслуживанием без соблюдения техники безопасности и пренебрежительным отношением к нашим рекомендациям.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка указывает на то, что массажное кресло должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде или здоровью людей, следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырье).

За дополнительной информацией по утилизации вы можете обратиться в точку продажи.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Phantom 5X

Название продукта: Массажное кресло

Номинальное напряжение: 220-240В~ 50Hz/60Гц

Номинальная мощность: 200Вт

Время работы по умолчанию: 20 мин

Класс безопасности: I

Внутренние составляющие: ПВХ, ПА, стальные,  
электрические и электронные детали

**Дата производства:** смотрите на упаковке.

Сделано в Китае

Месяц и год изготовления указаны на упаковочной коробке.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

тел. 8-800-700-14-29

[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

[info@ergonova.ru](mailto:info@ergonova.ru)

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены











Designed by Ergonova Germany

[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

