


*i*Rest™

SL-A30-6 Массажное кресло

*i*Rest™

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

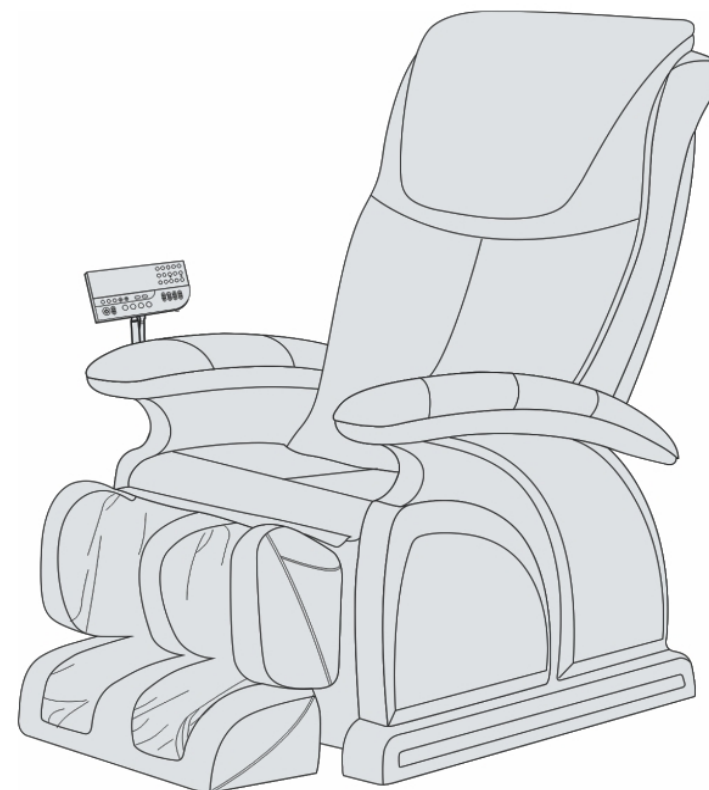

*i*Rest™

Официальное представительство в России и СНГ
компания "ВЕСТЕРНЛАЙН"
тел.: +7 842 354 56 36
e-mail: irest@bk.ru

ИНСТРУКЦИЯ - ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

www.ru-irest.ru e-mail: irest@bk.ru

Прежде всего, благодарим вас за покупку массажного кресла. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования кресла и четко следуйте ее указаниям. Обратите особое внимание на меры предосторожности и сохраните данную инструкцию для будущего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	02
Наименование компонентов.....	04
Функции и предназначение.....	05
Инструкция по эксплуатации.....	07
Технические характеристики.....	11

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям данного прибора.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой, чтобы избежать его повреждения.
- При использовании кресла, следуйте данной инструкции.
- Используйте с креслом только рекомендованные приспособления.
- Не используйте кресло вне помещений.
- Используйте кресло только по назначению так, как указано в инструкции.
- Никогда не пользуйтесь прибором, если у него поврежден шнур или штепсель, если он работает неправильно, если он был поврежден, если его уронили или если он побывал в воде.
- Не используйте прибор, если вас клонит в сон, а также находясь в нетрезвом состоянии.
- Не рекомендуется использовать кресло менее чем через час после приема пищи.
- Не используйте прибор в случае повреждения покрытия (обнажился встроенный механизм).
- Используйте кресло только при правильном заземлении.
- Не используйте кресло в тесном, плохо проветриваемом помещении, в помещении с высокой температурой или с повышенной влажностью.

Не рекомендуется пользоваться креслом.

- Лицам, страдающим от сердечной недостаточности, а также носящим на себе электронные медицинские приборы.
- Лицам с высокой температурой.
- Лицам с диагнозом остеопороз.
- Беременным женщинам и женщинам в период менструации
- Лицам, проходящим лечение или испытывающим недомогание следует перед использованием проконсультироваться у врача.
- Если недомогание или боль возникли во время использования кресла, необходимо немедленно остановить массаж и проконсультироваться у врача.
- Тем, у кого имеется искривление позвоночника.
- Людям с кожными заболеваниями.
- Детям до 12 лет, не умеющим правильно обращаться с прибором.
- Для массажа головы, колен или в области живота.
- Укрываясь одеялом или подушкой. Повышенная температура может причиной пожара, электрического шока или травмы.

Уважаемый покупатель!

Компания "TRG" благодарит Вас за лучший выбор. Производитель массажных кресел китайская компания "iRest" имеет Сертификат Соответствия, все кресла "iRest" одобрены для использования Министерством здравоохранения Китая.

Компания "TRG" гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии _____ со дня покупки. Данным Гарантийным Сертификатом компания "TRG" берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - * правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
 - * наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
2. Компания «TRG» оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в случае непредставления вышеуказанных документов или информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта и даты приобретения изделия.
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание.
5. Компания «TRG» не отвечает за недостатки Товара в следующих случаях:
 - а) Исполнения Товара, предназначенного для личных (бытовых, семейных) нужд, для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих назначению Товара;
 - б) Нарушения правил и условий эксплуатации, установки Товара, указанных в инструкции по эксплуатации;
 - в) Если на Товаре повреждены пломбы, имеются следы вскрытия, нарушения целостности Товара или следы попыток ремонта Товара при отсутствии подтверждения предварительного извещения Потребителя об обнаружении недостатков качества Товара;
 - г) Если недостатки качества вызваны внесенными в конструкцию или схему товара изменениями, которые не предусмотрены изготовителем;
 - д) Если недостаток Товара стал следствием действия непреодолимой силы, несчастного случая, умышленных или неосторожных действий (бездействия) Потребителя или третьих лиц;
 - е) Возникновения недостатков вследствие воздействия на Товар, а равно проникновения внутрь веществ, материалов, жидкостей, насекомых;
 - ж) Подключения Товара к сети или источнику электрического питания, параметры электрической энергии которых не соответствуют действующим в Российской Федерации техническим регламентам, а равно в случае возникновения недостатков по причине временного отклонения параметров электрической энергии от требований вышеуказанных регламентов (перепад напряжения и т.п.)
6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам действующим законодательством Российской Федерации.
7. В случае наличия исправления, гарантийный талон считается не действительным.





Гарантийный Сертификат

Наименование изделия:

Страна происхождения: КИТАЙ

Серийный номер:

Дата покупки: « » 20 г.

Подпись продавца:

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Обращайтесь к официальному представителю
компании «ТРГ» в вашем регионе.

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф. И. О. :

Адрес:

ТЕЛЕФОН:

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии.

Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии
ознакомлен.

Подпись покупателя:

Место продажи:

Место для печати:

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Безопасность.

- Используйте только подходящую к штепселю розетку.
- Не пытайтесь включить\выключить кресло из сети влажными руками. Вы можете получить травму или электрический шок.
- Не используйте влажную тряпку при чистке электронных частей прибора.
- Оберегайте прибор от воздействия высокой температуры, огня или прямых солнечных лучей.
- Не забывайте отключать кресло от питания каждый раз после использования.
- Чистите кресло только сухой тряпкой, не используйте растворы, содержащие ацетон, бензин или спирт.
- Не толкайте и не передвигайте кресло на колесиках по неподходящей поверхности. Приподнимите и перенесите его.
- Следите за тем, чтобы индивидуальный сеанс работы кресла не длился слишком долгое время.
- Старайтесь не повредить шнур, не тяните его с силой, не скручивайте, не складывайте. Повреждение шнура может вызвать электрический шок.
- Если массажное кресло вышло из строя, немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр.
- При отключении электроэнергии нажмите кнопку "off", затем выньте штепсель из розетки. В противном случае при включении электроэнергии может возникнуть опасность.
- Никогда ничего не засовывайте в отверстия.

Примечания

- При работедвигающиеся механизмы кресла издадут специфичные звуки.
- Если панель управления выключена, проверьте - включен ли прибор в сеть.
- Если установленное время массажа вышло, сработает система автоматического выключения работы прибора.
- При слишком длительном использовании кресла датчик температуры автоматически выключит работу прибора. Вы сможете снова использовать кресло после получасового перерыва.

НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

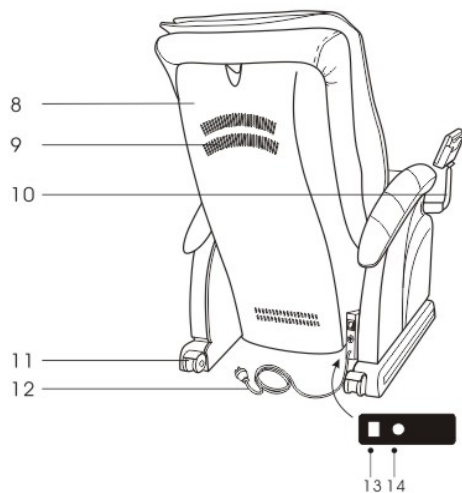

1. Подушка
2. Пульт управления
3. Подлокотник
4. Подушка
5. Отделение для икр
6. Отделение для ступней
7. Накидка
8. Задняя панель
9. Вентиляция
10. Подставка под пульт управления
11. Задние колёсики
12. Шнур и штепсельная вилка
13. Разъем для предохранителя
14. Разъем соединения


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Массажное кресло
Модель: SL-A30-6
Входное напряжение: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz
Мощность: 150W

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


5. Установка и использование пульта управления и мини-столика.

(1) Установите на кресло пульт управления. (2) Пульт управления может свободно наклоняться на 180 градусов сверху вниз. (3) Пульт управления может вращаться на 360 градусов.

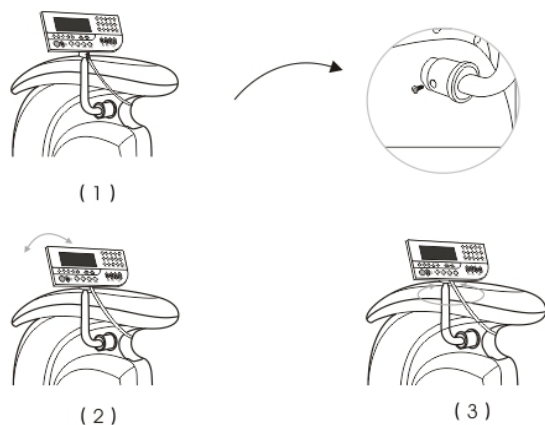

6. Перенос кресла.

Наклоните кресло на себя и убедитесь, что путь для движения свободен. Передвигайте кресло с помощью колесиков.

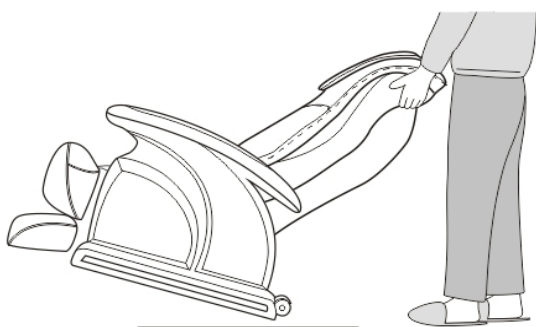

ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Функции

- Данное кресло оснащено четырёхколёсным роликовым механизмом, который при прокатывании вверх-вниз по спине производит массаж.
- В данной модели представлены 5 видов массажа: Шиаци, разминание, похлопывание, постукивание, синхронное похлопывание и разминание.
 - Автоматическое сканирование положения плеч.
 - В данной модели представлены 4 специальных автоматических функций массажа: комфортный массаж, расслабляющий массаж, массаж, снимающий боль, и массаж, снимающий усталость.
 - Для области верхней части тела предусмотрены 4 автоматических режима массажа: общий массаж, частичный и фиксированный, спины и поясницы и фиксированная терапия)
 - В ручном режиме - возможность выбора одной из трёх областей массажа: общий, частичный и фиксированный. Каждый из указанных массажей предусматривает 5 уровней скорости. В режиме похлопывания, Шиаци и постукивания вы можете установить широту воздействия массажа, а именно: Широкий, Средний и Узкий.
 - С помощью отделений для ног осуществляется массаж икр и акупунктурный массаж стоп.
 - Доступна функция вибромассажа в области ягодиц с изменением силы вибрации.
 - Спинка и отделение для икр обладают функцией откидывания и автоматического возврата в исходное положение. Возможность откидывать спинку как совместно с отделением для ног, так и отдельно от него.
 - Роликовый механизм спины приводится в исходное положение автоматически.

Предназначение

устраняет усталость
улучшает кровообращение
снимает напряжение в мышцах
облегчает боль в мышцах
снимает нервную
снимает мышечную усталость

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

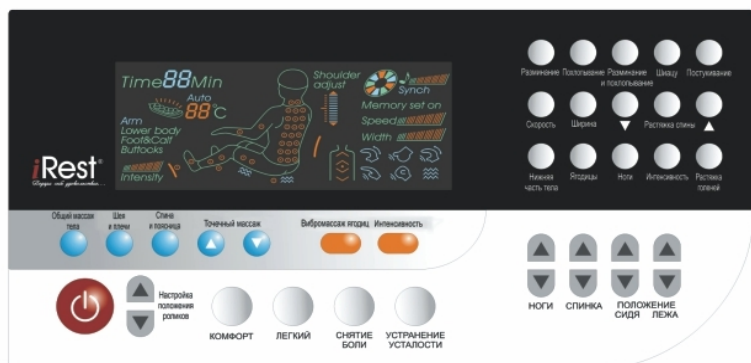

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Выключение кресла и остановка сеанса массажа.

(1) Нажатие на красную кнопку во время массажа останавливает его, спинка и отделение для ног автоматически возвращаются в исходное положение; или все функции массажа остановятся, когда время массажа закончится, но спинка и отделение для ног не будут возвращены в исходное положение

(2) Отключение кресла.




4. Регулировка и применение накидки и подушки кресла.

Вы можете использовать или снять накидку, которая может ослабить действие массажа шеи и плеч способом растирания, по вашему усмотрению (рекомендовано использовать накидку).

Накидка кресла присоединяется к спинке кресла при помощи молнии (1). Подушка присоединяется к накидке при помощи липучки (2).

Предупреждение: Не используйте кресло без накидки, так как это может причинить вам вред.

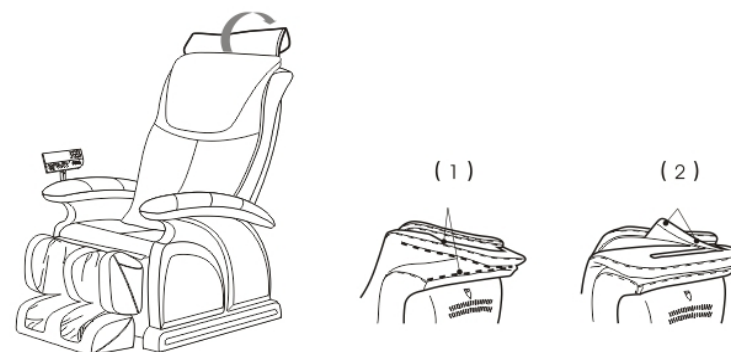

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(6) Воздушно-компрессионный массаж:

Функции массажа	Кнопка	На дисплее	Дополнительные функции
Нижняя часть тела	Ноги	Воздушный массаж нижней части тела	Два уровня интенсивности
Ягодицы	Ягодицы	Включите/Отключите функцию воздушного массажа области ягодиц	Два уровня интенсивности
Ноги	Ноги	Воздушный массаж только области икр и ступней Foot&Calf	Два уровня интенсивности
Интенсивность воздушного массажа	Интенсивность	Изменение интенсивности воздушного массажа нижней части тела	Два уровня: сильный, слабый
Растяжка голени	Растяжка голени	При нажатии этой кнопки включится функция растяжки голени в режиме воздушного массажа ног или стоп.	

(7) Регулировка угла подъёма отделения ног при растяжке голени и спинки кресла

Ноги	▲	Кнопка для подъёма отделения ног: удерживайте кнопку для поднятия отделения ног и отпустите, чтобы зафиксировать его на желаемой высоте
	▼	Кнопка для опускания отделения ног: удерживайте кнопку для опускания отделения ног и отпустите, чтобы зафиксировать его на желаемой высоте
Спинка	▲	Кнопка для подъёма спинки кресла: удерживайте кнопку для поднятия спинки кресла и отпустите, чтобы зафиксировать её на желаемом уровне
	▼	Кнопка для опускания отделения ног: удерживайте кнопку для опускания отделения ног и отпустите, чтобы зафиксировать её на желаемом уровне
Положение: сидя, лёжа	▲	Кнопка подъёма кресла в сидячее положение 1: удерживайте кнопку для медленного поднятия спинки кресла, в этот момент отделение для ног медленно опускается, отпустите кнопку для фиксации положения
	▼	
	Стрелка вверх Стрелка вниз Слева	Кнопка опускания кресла в лежачее положение 1: удерживайте кнопку для медленного опускания спинки кресла, в этот момент отделение для ног медленно поднимается, отпустите кнопку для фиксации положения
	▲	Кнопка подъёма кресла в сидячее положение 2: удерживайте кнопку для медленного поднятия спинки кресла, в этот момент отделение для ног медленно опускается, нажмите любую другую кнопки (кроме кнопки положения лёжа 2) для фиксации положения
▼		
Стрелка вверх Стрелка вниз Справа	Кнопка опускания кресла в лежачее положение 2: удерживайте кнопку для медленного опускания спинки кресла, в этот момент отделение для ног медленно поднимается, нажмите любую другую кнопки (кроме кнопки положения сидя 2) для фиксации положения	


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите массажное кресло в сеть.



2. Управление с помощью пульта

(1) Старт/стоп работы массажного кресла

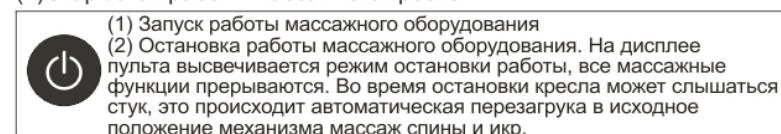

(2) Запуск работы массажного кресла


1) Чтобы начать массаж нажмите на красную кнопку, автоматически кресло принимает положение нулевой гравитации.

2) Задайте верхнюю точку массажа, после этого кресло автоматически задаст точки ваших плеч и вы услышите специфический сигнал. После сигнала вы можете корректировать точки положения плеч с помощью кнопок "вверх"(UP) и "вниз"(DOWN). Механизм массажа приступит к работе автоматически через 5 - 10 секунд, если за это время вы не скорректируете точки положения плеч.

3) Корректировка точек положения плеч.

▲	Настройка положения роликов	Поднять массажный механизм вверх для достижения оптимального положения.
▼		Опустить массажный механизм вниз для достижения оптимального положения.


Оптимальное положение роликов

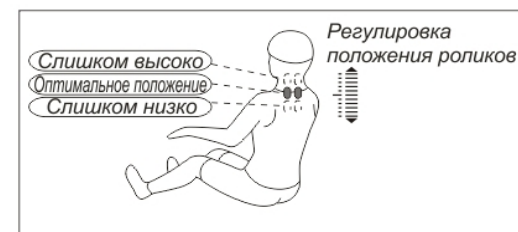

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ






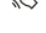












(3) Характеристики массажа в автоматическом режиме:

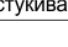Массаж	Кнопка	Функции массажа	Характеристика функции	На дисплее
Виды массажа при автоматическом режиме	 Комфорт	Для комфорта	Расслабляет и стимулирует все мышцы	Auto 01
	 Легкий	Для релаксации	Улучшение кровообращения	Auto 02
	 Снятие боли	Для снятия боли	Глубокий точечный массаж для снятия напряжения в больных точках	Auto 03
	 Устранение усталости	Для устранения усталости	Снимает усталость, оказывает ободряющее воздействие на тело	Auto 04

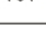


Массаж	Кнопка	Функции массажа	Характеристика функции	На дисплее	
Автоматический режим	 Общий массаж тела	Массаж всей спины	Массаж воспроизводится в области всей спины	Auto F1	
	 Шея и плечи	Массаж шеи и плеч	Массаж воспроизводится в области шеи и плеч	Auto F2	
	 Спина и поясница	Массаж спины и поясницы	Общий массаж спины и поясницы	Auto F3	
	 Точечный массаж	При выборе фиксированных точек области массажа, нижняя точка поясницы будет точкой отсчёта, вы сможете устанавливать 8 положений над точкой отсчёта для воспроизведения автоматического массажа. На дисплее пульта управления будут высвечиваться режимы (F4, F5, F6... F9, FA, FB). В автоматическом режиме с помощью кнопок Вверх/Вниз вы сможете выбрать функции фиксированного массажа.			

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(4) Характеристики массажа в ручном режиме:

Функции массажа	Кнопка	На дисплее	Дополнительные функции
Режимы массажа	 Шиatsu		-Скорость -Ширина
	 Разминание		-Скорость
	 Похлопывание		-Скорость -Ширина
	 Разминание и похлопывание		-Скорость
	 Постукивание		-Скорость -Ширина
Расслабление спины	 Растяжка спины	Фиксированный массаж конкретной точки 	Кнопка Вверх: Переведите механизм массажа спины вверх в режиме фиксирования в заданную точку; Кнопка Вниз: переведите механизм массажа спины вниз в режиме фиксирования в заданную точку.
		Частичный массаж маленькой области 	
		Общий массаж верхней части тела 	
Скорость	 Скорость	Скорость  5 уровней скорости	
Ширина	 Ширина	Ширина  3 уровня регулировки ширины	

(5) Вибромассаж:

Функция	Кнопка	На дисплее
Вибромассаж в области ягодиц	 Вибромассаж ягодиц	Кнопка функции вибромассажа ягодиц 
Интенсивность	 Интенсивность	Выбор силы вибромассажа ягодиц 